

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

アルケア株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル0120-770175
(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)
ホームページからもお問い合わせいただけます。
http://www.alcare.co.jp

ÄLCARE

準備

③ストーマ周囲を清拭します




【ウロストミーの方の場合】

器具交換時に尿が滲み出していますので、ロールガーゼ（ガーゼを丸めてテープで止めたもの）で尿を吸い取りながら清拭を行うとスムーズにできます。

交換の際は以下の点にご注意ください。 **使用上のご注意**
■入浴直後の交換は、お避けください。面版の温度が上がっているため、粘着強度が高まり、剥がれにくいことがあります。入浴後交換の場合は、30分ほどたって面版の温度が下がったのを確認の上、行ってください。
ユー케어-C/Ccをお使いの方
●1日交換タイプは通常、24時間後の交換が標準となっていますので、それより早く交換する場合は、粘着力が強く、剥がれにくいことがありますのでご注意ください。
●個人差はありますが、商品の特性上、貼付8時間後が最も粘着力となりますので、特にその前後での交換はお避けください。

排出口の開閉方法

●D・Dcの場合 排出口の閉じ方

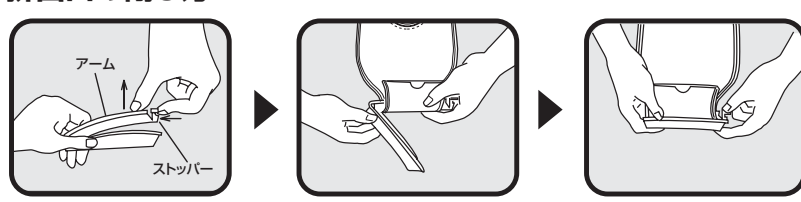

排出口の開け方



しっかりとストーマ袋を押さえ、クリップのストッパーを押しながら引き下げてクリップを外します。

はじめに

“ユー케어”は、ストーマ袋と面版が一体となった単品系(ワンピース)器具です。

安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、

この取扱説明書に従ってご使用ください。



なお、商品についてご不明な点は、
お客様相談室までご連絡ください。

【使用上のご注意】や【保管上のご注意】では、危険度に応じて次の区分をしています。


△警告……誤った取扱いをすると、中程度以上の人身事故が想定される内容を示します。

注意……誤った取扱いをすると、人が軽度の傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

使用上の注意

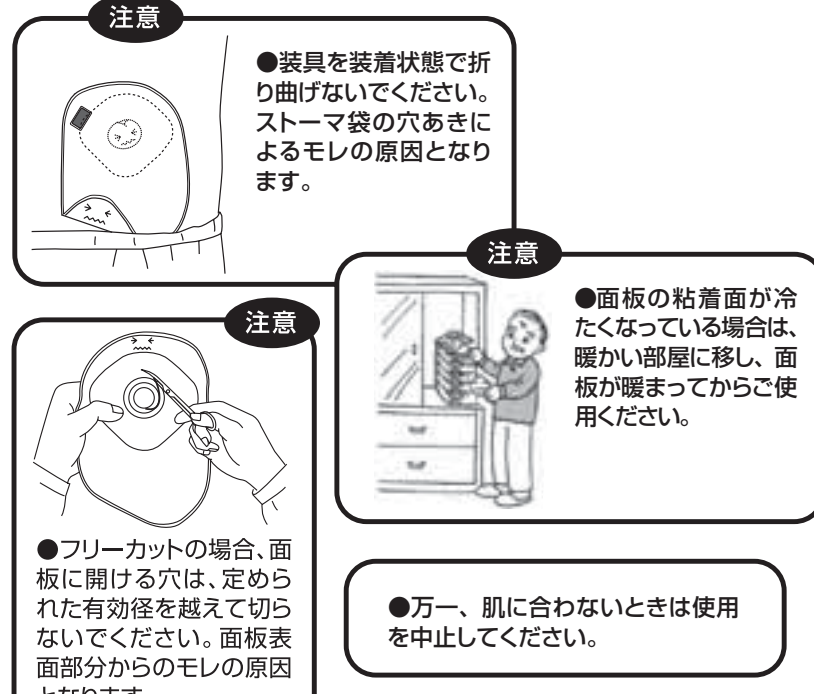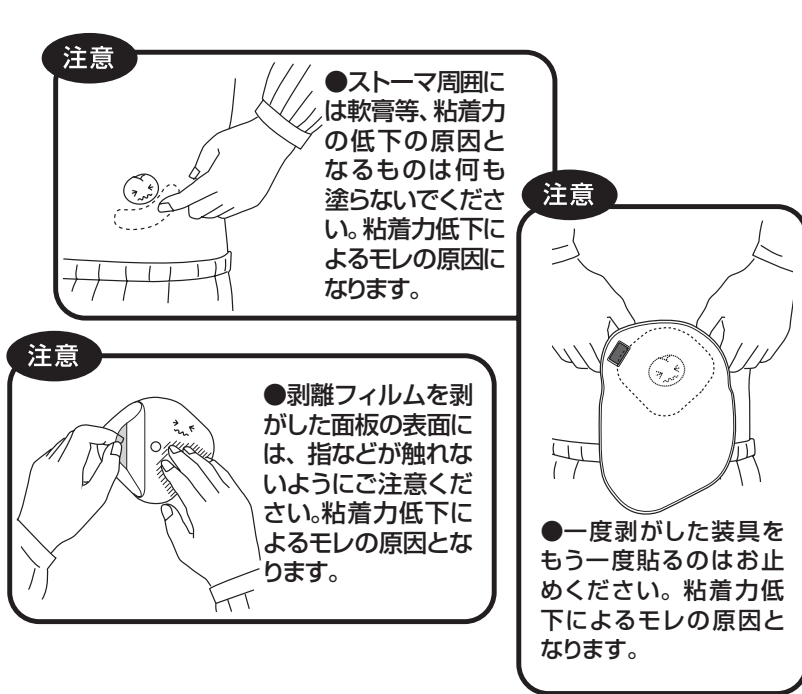


ユー케어の種類

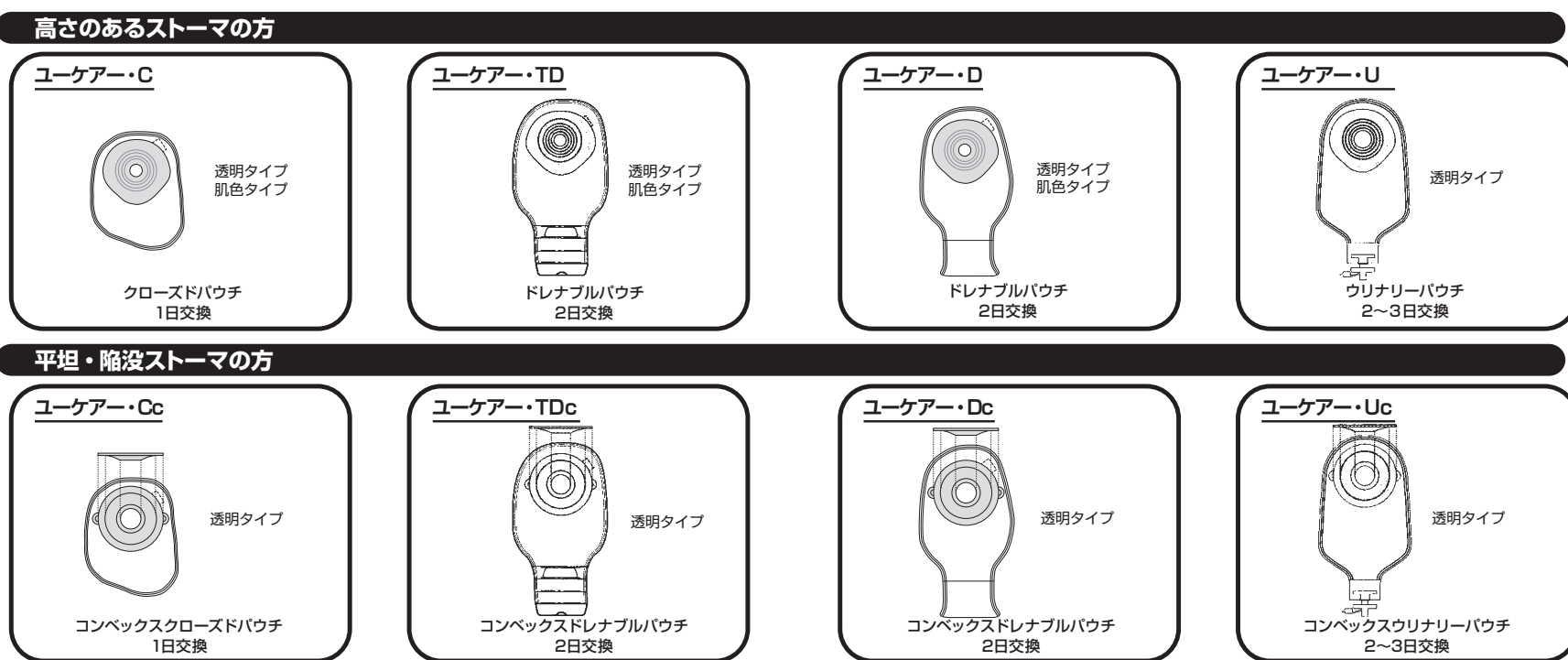

使用手順

排出口の開閉方法

●TD・TDcの各部分名称

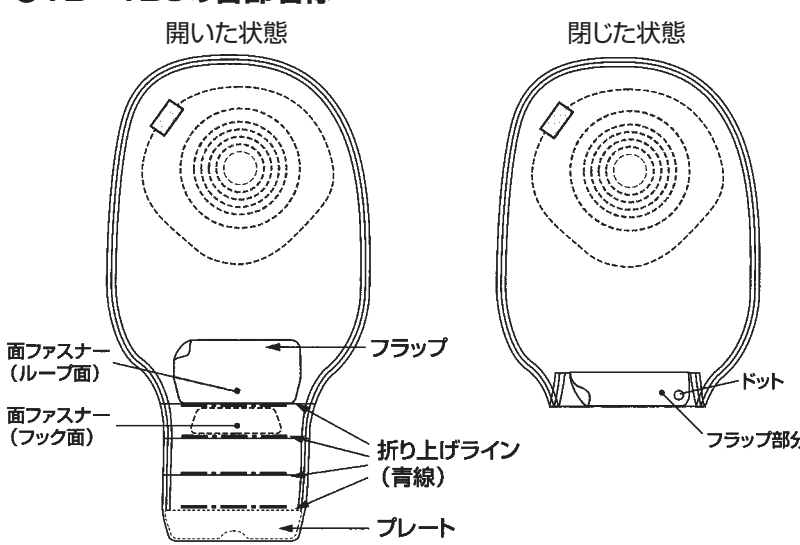

●面ファスナーのループ面・フック面に潤滑油や水が付着した状態で使用すると、接着力が弱まったり、衣類を汚す恐れがあります。水分や油分を十分に拭き取ってからご使用ください。

準備（共通）

①必要物品を用意します



②器具を剥がします




皮膚を傷つけないように片手で腹の面版近くを押さえながら、上から下へゆっくり、やさしく剥がします。
*面版が皮膚に密着し剥がれないときは、プロケアリムーバー（剥離剤）で、皮膚と面版の間を潤滑しながら剥がすようにしてください。
*使用済みの器具は、排泄物をトイレに流した後、新聞紙などに包み、ゴミ袋に入れてお捨て下さい。器具は通常、「燃えないゴミ」の扱いですが、地域により異なる場合がありますので、詳しくは各自自治体へ確認してください。

使用手順


●TD・TDcの場合 排出口の閉じ方



排出口の開け方

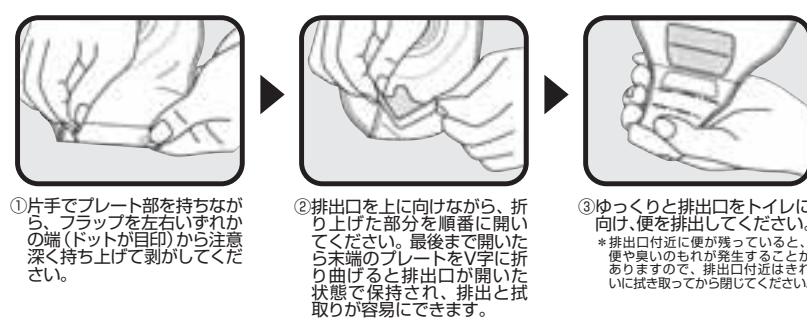


●フリーカットの場合（イラストはユー케어-D-20です。）

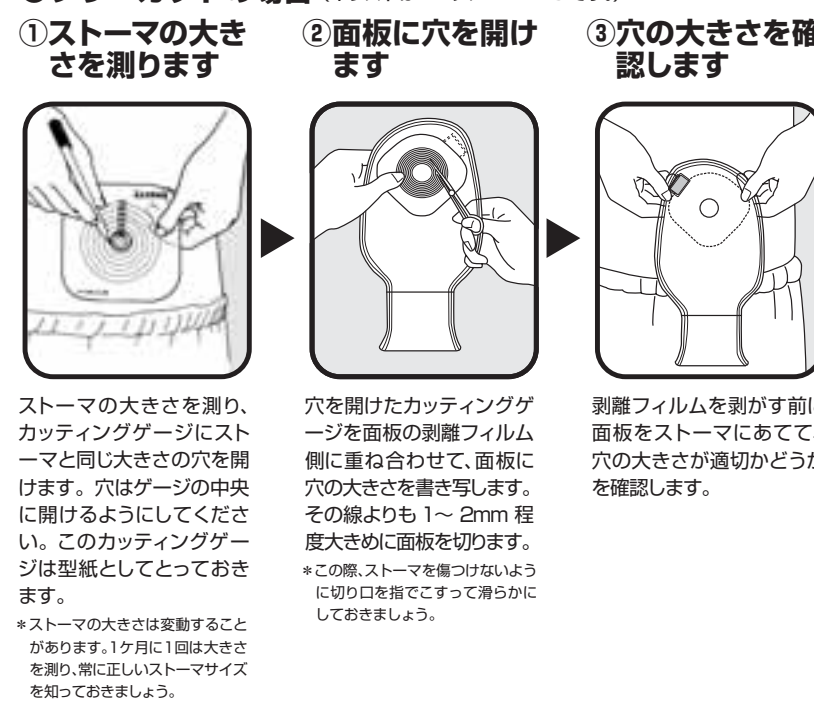

使用手順

脱臭ガス抜きフィルターについてのご注意

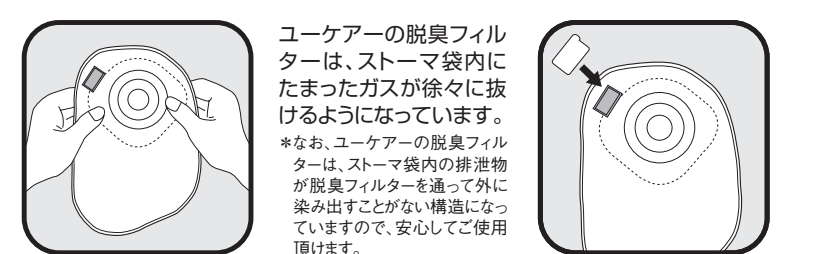

ユー케어の脱臭フィルターは、ストーマ袋内にたまったガスが徐々に抜けるようになっています。
*なお、ユー케어の脱臭フィルターは、ストーマ袋内の排泄物が脱臭フィルターを通過して外に染み出すことがない構造になっていますので、安心してご使用いただけます。

ただし、以下のような場合は、パッケージ内の脱臭フィルターカーバーシールを貼って、通気孔をふさいでください。
①ガスが抜けすぎると、真空状態のようになり、ストーマから排出された便が袋の中に落ち、ストーマ周囲に貯留してしまうことがあります。このような場合は、パッケージ内の脱臭フィルターカーバーシールを貼って、通気孔をふさいで、ストーマ袋内にガスがたまるようにしてください。ストーマ袋内にガスがたまったら、シールをはがして手で軽くストーマ袋を押してガスを出してください。
②入浴の時
入浴時に外側からの水が脱臭フィルターに触れると活性炭が水を吸収してしまい、入浴後に活性炭を含んだ水が染み出すことで衣服を汚してしまふ原因となります。

使用手順

保管上の注意

●粘着力不足によるモレの原因となりますので、保管の際には次のことを避けてください。



ユー케어の種類と規格

種類						種類					
商品コードNO.	種類	ストーマ有効径(mm)	ストーマ径×サイズ(mm)	入数(枚)	入数(枚)	商品コードNO.	種類	ストーマ有効径(mm)	ストーマ径×サイズ(mm)	入数(枚)	入数(枚)
16791	D01色	60(フリーカット)	150×200	30枚		17451	TD ¹⁸ 18	60(フリーカット)	150×275	10枚	
16801	C-20					17461	TD-20				
16802	C-25	19～24				17462	TD-25	19～24			
16803	C-30	24～29				17463	TD-30	24～29			
16804	C-35	29～34				17464	TD-35	29～34			
16805	C-40	34～39				17465	TD-40	34～39			
16806	C-45	39～44				17466	TD-45	39～44			
16807	C-50	44～49				17467	TD-50	44～49			
16821	Cc-22	18～21				17471	TDc-22	18～21			
16822	Cc-25	21～24				17472	TDc-25	21～24			
16823	Cc-28	24～27				17473	TDc-28	24～27			
16824	Cc-32	27～31				17474	TDc-32	27～31			
16825	Cc-36	31～35				17475	TDc-36	31～35			
16826	Cc-40	35～39				17476	TDc-40	35～39			
16827	Cc-45	39～44				17477	TDc-45	39～44			
16828	Cc-50	44～49				17478	TDc-50	44～49			